




Contraindicații

Consultați medicul înainte de utilizare dacă oricare dintre următoarele situații se aplică:

- Dacă ați primit recomandări medicale să evitați activitățile sexuale.
- Dacă aveți anemie falciformă, leucemie, tumori ale măduvei osoase sau alte afecțiuni care afectează coagularea sângelui și pot duce la sângerări sau erecții prelungite.
- Dacă aveți un penis cu formă anormală.

Avertismente și precauții:

- Nu folosiți Active LoopRing mai mult de 30 de minute pe utilizare. Nu adormiți purtând Active LoopRing.
- Așteptați 60 de minute între utilizări.
- Apelați medicul dacă apare vreo problemă. Opriți utilizarea dispozitivului dacă problemele persistă.
- Nu folosiți Active LoopRing dacă simțiți durere la nivelul penisului. Durerea poate fi un semn de avertizare că dispozitivul provoacă leziuni.
- Nu folosiți Active LoopRing dacă nu aveți funcționalitatea adecvată a mâinii pentru a îndepărta ușor dispozitivul.
- Nu consumați alcool sau sedative în timpul utilizării Active LoopRing.
- Nu folosiți Active LoopRing ca metodă de contracepție.

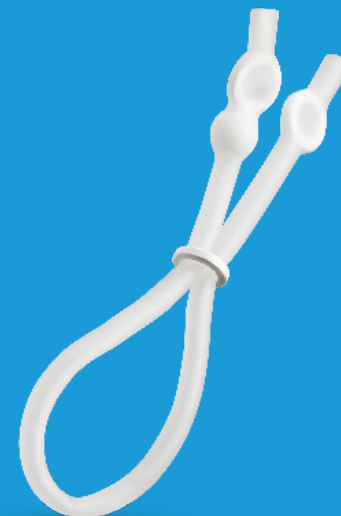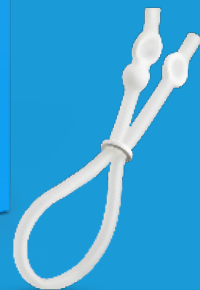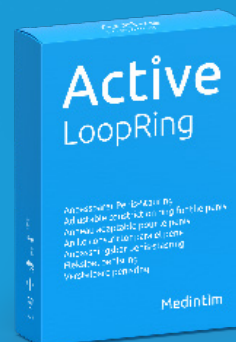

Utilizare și întreținere:

LoopRing este reutilizabil. Curățați-l cu apă caldă și săpun blând și păstrați-l într-un loc uscat. Înlocuiți-l dacă materialul devine casant sau își pierde tensiunea.

Material component:

TPE (elastomer termoplastic)

REF IA ALR

EAN 4013273 001922

Fabricat în Germania



Producător:

KESSEL medintim GmbH

Kelsterbacher Str. 28

64546 Morfelden-Walldorf

Germany

email: export@medintim.de

Distribuitor:

IQ ANDROMED

Distribuitor autorizat ROMÂNIA

Str. Eroilor, Nr. 15

Florești, Jud. Cluj

407280 ROMÂNIA

email: contact@iqandromed.com

Active LoopRing

Inel de constricție reglabil

www.medintim.de

www.iqandromed.ro

Medintim

Ce este Active LoopRing?

Active LoopRing este utilizat pentru tratamentul bărbaților cu disfuncție erectilă sau impotență. Inelul cu constricție reglabilă este destinat îmbunătățirii erecției penisului.

Active LoopRing este alcătuit dintr-o buclă ajustabilă din cauciuc siliconat, care se poziționează la baza penisului și se strânge. Această constricție reduce fluxul de sânge care părăsește penisul.

Active LoopRing poate fi strâns sau slăbit pentru a se adapta corespunzător. Sistemul de fixare de tip inel și mecanismul cu bilă permite ajustarea facilă a tensiunii.



Ce este disfuncția erectilă?

Disfuncția erectilă este denumită în mod obișnuit impotență. Impotența reprezintă incapacitatea unui bărbat de a menține o erecție suficient de fermă pentru a desfășura un act sexual. Ereecțiile normale sunt rezultatul creșterii fluxului sanguin către penis. Acest sânge este apoi menținut prin închiderea temporară a venelor care drenează penisul.


Unii bărbați nu pot menține erecția deoarece venele penisului rămân deschise și împiedică stocarea unei cantități suficiente de sânge în penis. Această afecțiune se numește scurgere venoasă.

Mulți dintre acești bărbați pot fi ajutați prin utilizarea Active LoopRing.


Instrucțiuni de utilizare:

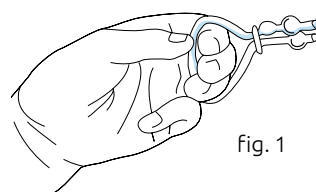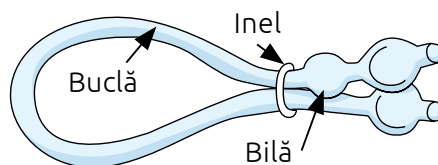


Întindeți dispozitivul. Prindeți bucla cu mâna stângă. Capătul tubului cu bila este îndreptat în sus (Fig.1).

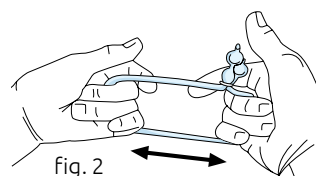

Cu mâna dreaptă, prindeți bucla de lângă inel și întindeți dispozitivul (Fig. 2).

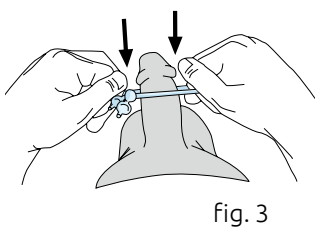


Introduceți vârful penisului prin bucla întinsă și glisați dispozitivul de-a lungul axului penisului (Fig. 3) până când ajunge la bază (Fig. 5).

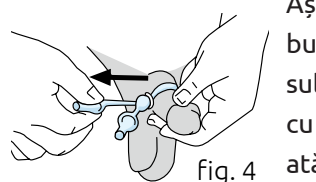


Așezați dispozitivul astfel încât bucla să fie în jurul bazei penisului. Partea tubului prevăzută cu bila trebuie să fie poziționată în partea superioară a penisului. Apucați capătul inferior al tubului, fără bilă. Trageți orizontal, îndepărtându-l de penis, până când dispozitivul se fixează ușor, fără a strânge excesiv, în jurul bazei penisului (Fig. 4).

Trageți orizontal, îndepărtându-l de penis, până când dispozitivul se fixează ușor, fără a strânge excesiv, în jurul bazei penisului (Fig. 4).

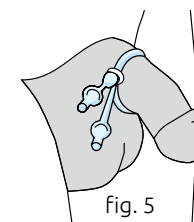


După ce este montat, capetele tubului trebuie să fie poziționate pe oricare parte a penisului, cu bila în partea superioară (Fig. 5).

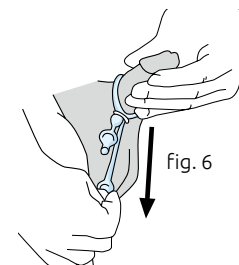

Pentru o tensiune adecvată: Prindeți clapeta de la capătul tubului fără bilă și trageți în jos (Fig. 6). LoopRing trebuie să fie suficient de strâns pentru a împiedica sângele să părăsească penisul. Prea

multă tensiune poate duce la disconfort și ar putea provoca leziuni penisului. Dacă erecția nu este suficient de fermă, aplicați presiune cu mâna pe zona din spatele scrotului. Acest lucru poate împinge mai mult sânge în penis. Pe măsură ce penisul devine ferm, LoopRing poate fi strâns sau slăbit pentru a obține o erecție, oferind în același timp cel mai mare confort.

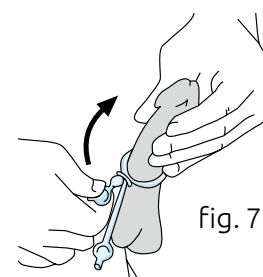

Pentru a slăbi tensiunea: După actul sexual sau dacă erecția este prea fermă, LoopRing poate fi slăbit trăgând în sus de capătul tubului prevăzut cu bilă (Fig. 7). Odată ce este complet slăbit, LoopRing poate fi îndepărtat prin glisare peste vârful penisului.

Notă*

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza Activ LoopRing. Acest dispozitiv poate provoca leziuni dacă nu este utilizat corect.