

Active³

Sistem de menținere a
erecției



Medintim



A close-up photograph of a man's bare torso. He is holding a blue, cone-shaped medical device with both hands, positioning it against his chest. The device has a clear, cylindrical base and a blue, bulbous top. A dark blue text box with a white dot points to the blue top of the device.

Medintim

Plasați
aplicatoarele
și conul.

Active³
Sistem de menținere a
erecției



Medintim

Glisați un
inel de constricție
folosind conul.

Active³
Sistem de menținere a
erecției

A shirtless man's torso is shown from the chest down to the waist. He is holding a blue manual ring with both hands, positioning it around his penis. The background is a solid orange color.

Medintim

**Alternativ,
montați
inelul manual
cu mâinile.**

Active³
Sistem de menținere a
erecției

Medintim

Gata de
utilizare.



Active³
Sistem de menținere a
erecției

A person is shown from the side, applying a blue, cylindrical device to their upper arm. The device has a white cap and a blue body. The person's arm is extended, and they are holding the device with their other hand. The background is a solid blue color.

Medintim

Aplicare pe corp

A close-up photograph of a man's torso and arm. He is holding a clear, cylindrical medical device with a blue cap. He is using a small spray bottle to apply lubricant to the opening of the device. The background is a warm, orange-toned gradient.

Medintim

Aplicați
gelul lubrifiant.

Active³
Sistem de menținere a
erecției

Medintim



Țineți dispozitivul
fix pe corp și pompați.

Active³
Sistem de menținere a
erecției

Medintim

Vacuumul din
cilindru creează
erecția.

Active³
Sistem de menținere a
erecției

Medintim

Împingeți
inelul de constricție
pe penis.

Active³
Sistem de menținere a
erecției



Medintim

**Inelul menține erecția
(maxim 30 de minute).**

Active³
Sistem de menținere a
erecției



Medintim

După utilizare:
Îndepărtați inelul de constricție.


Active³
Sistem de menținere a
erecției



Medintim

Penisul revine la starea inițială.

Active³
Sistem de menținere a
erecției

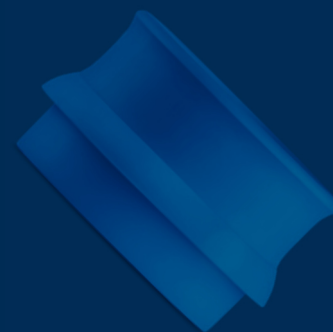

www.medintim.de
www.iqandromed.ro



CE 0483

Dispozitiv înregistrat la FDA
Fabricat în Germania