

Întrebări frecvente

Există efecte adverse?

Dacă pacienta dumneavoastră suferă de uscăciune vaginală, dispozitivul poate provoca iritații sau frecare la nivelul labiilor sau în interiorul vaginului. Dacă pacienta simte disconfort prin frecare sau știe că are o vulvă sensibilă, poate încerca aplicarea unui lubrifiant pe bază de apă pentru a vedea dacă acest lucru ajută.

Poate fi utilizat Efemia Bladder Support împreună cu un sterillet?

Da.

De câte ori poate fi reutilizat produsul?

Dispozitivul poate fi reutilizat de câte ori este necesar, până la 16 ore pe zi, pe durata de viață a produsului de 3 luni.

Cum știu ce mărime este potrivită?

Cel mai bine este să testezi pur și simplu și să începi cu cea mai mică mărime. Dacă aceasta nu funcționează pentru pacienta dumneavoastră și continuă să aibă scurgeri sau îi provoacă disconfort, recomandați să încerce o mărime mai mare. Chiar și dacă cea mai mică mărime funcționează pentru ea, poate fi o idee bună să încerce și o mărime mai mare pentru comparație. Mai mic nu înseamnă întotdeauna mai confortabil.

efemia

bladder support



Despre produs

Efemia Bladder Support este un dispozitiv medical care se introduce în vagin pentru a reduce pierderile de urină cauzate de efortul fizic. Efemia este reutilizabil și poate fi utilizat până la 16 ore pe zi, timp de 3 luni. Este ușor de curățat cu apă și săpun și poate fi, de asemenea, sterilizat prin fierbere.



Eficient



Confortabil



Sustenabil


O opțiune sustenabilă

Producția unui dispozitiv Efemia Bladder Support este echivalentă, din punctul de vedere al amprente de carbon, cu consumul zilnic de absorbante pentru incontinență de unică folosință (în medie 4 absorbante). Trecerea de la absorbantele pentru incontinență la Efemia Bladder Support economisește, în medie, 46 kg CO₂ echivalent pe an și reduce cantitatea de deșeuri menajere cu până la 29 kg pe an.



Efemia Bladder Support comparativ cu dispozitivele pentru incontinență urinară de unică folosință

Deși costul inițial al dispozitivului Efemia Bladder Support este mai ridicat decât cel al celor două alternative de unică folosință din graficul de mai jos, Efemia devine o opțiune mai economică după aproximativ jumătate de lună până la o lună. În decurs de un an, se pot economisi între 500 și 1.000 GBP per pacient.

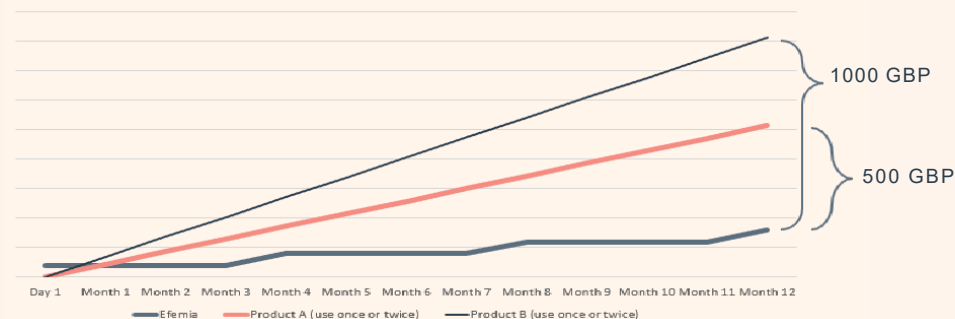


Design

Dezvoltarea și designul dispozitivului Efemia Bladder Support se bazează pe teoria integrală, aceeași teorie științifică utilizată și în cele mai comune metode chirurgicale pentru incontinența urinară de efort, cum este TVT. Efemia este proiectată să susțină uretra prin peretele vaginal cu ajutorul celor două inele de suport. Inelele susțin „genunchiul uretral”, situat la nivelul mijlociu al uretrei, atunci când uretra și colul vezical coboară sub presiunea abdominală crescută. Cele două inele de suport au aceeași distanță ca lățimea benzii TVT. Lungimea tijei dispozitivului este proiectată astfel încât inelele de suport să se situeze în aceeași poziție ca banda TVT. Mânerul menține dispozitivul în poziția corectă, împiedicând alunecarea prea adânc în vagin. Forma inelelor asigură eficiența dispozitivului indiferent de direcția în care este îndreptat mânerul, minimizând astfel erorile utilizatorului.

Dovezi clinice

Siguranța și performanța dispozitivului Efemia Bladder Support au fost evaluate într-un studiu clinic controlat, randomizat, care a inclus 97 de femei. Studiul a confirmat că dispozitivul a atins obiectivul principal de performanță, reducând scurgerile urinare (reducerea mediană în timpul testelor de provocare: 77%).

Efectele secundare observate au fost ușoare și tranzitorii. Astfel, analiza beneficiu-risc a dispozitivului a concluzionat că riscul apariției oricăror efecte secundare și severitatea acestora sunt considerate acceptabile în raport cu beneficiile pe care utilizatorul le obține datorită performanței dispozitivului.

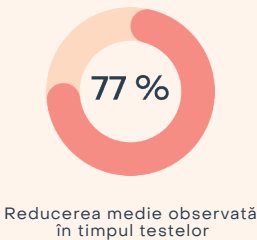

Citește studiul aici!

Chestionare post-marketing

Acceptarea dispozitivului Efemia de către utilizatori a fost evaluată atât în rândul femeilor mai în vârstă (vârsta medie 55 de ani), cât și în rândul celor mai tinere (vârsta medie 36 de ani), în viața de zi cu zi și în timpul activităților fizice precum ridicarea de greutate, cross-fit sau alergare. Studiile au arătat o acceptare ridicată a dispozitivului. În medie, 72% dintre cei 130 de participanți au declarat că este probabil să continue să folosească Efemia (nota mediană pe o scală de la 0 la 10 a fost 8).



7/10 ar continua să folosească Efemia



8/10 ar recomanda Efemia

Mărimi

Dispozitivul Efemia Bladder Support este disponibil în trei mărimi diferite: 30 mm, 35 mm și 40 mm. Se începe prin prescrierea Kit-ului Starter, care include toate cele trei mărimi, iar pacienta le poate încerca singură acasă, în timpul activităților în care experimentează scurgeri urinare. Odată ce a descoperit care mărime i se potrivește, i se prescrie o singură mărime la fiecare trei luni.


30 mm



35 mm



40 mm

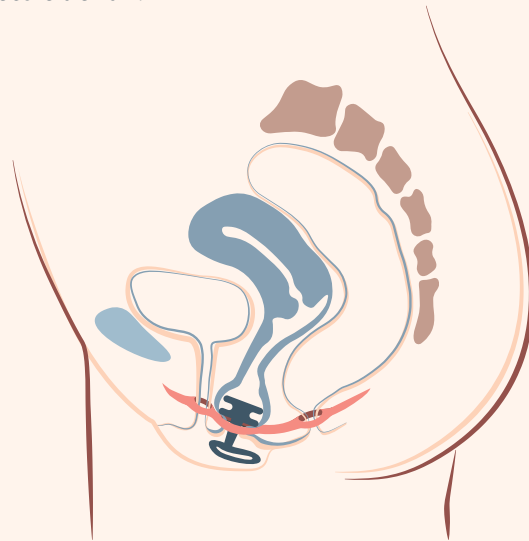

Mărimea potrivită este esențială pentru confort și eficiență

Material

- 100% Silicon de grad medical
- Moale și flexibil, dar suficient de stabil pentru a susține uretra în perioadele de creștere a presiunii abdominale.
- Materialul este durabil și rezistent, astfel încât poate face față mediului vaginal.
- Nu conține metale grele, substanțe ignifuge, ftalați, bisfenoli, compuși fluorurați, PFAS, coloranți, substanțe antibacteriene, latex sau proteine de origine animală.
- Materialul a fost testat pentru biocompatibilitate și respectă standardele pentru dispozitive medicale, ISO 10993-1:2018 și USP clasa IV.

Precauții: 18+ Nu utilizați dacă sunteți însărcinată..