

**94% au observat o
reducere a pierderilor de urină**

Treizeci și patru de alergătoare care se confruntau cu pierderi de urină în timpul alergării au testat Efemia Bladder Support. 94% dintre ele au constatat că Efemia Bladder Support a redus pierderile de urină în timpul alergării.

REF: CI8006-02

Încearcă-l acasă!

Setul Starter este conceput pentru a te ajuta să găsești mărimea care ți se potrivește cel mai bine și care este cea mai confortabilă pentru tine. Setul include toate cele trei mărimi și poate fi reutilizat timp de trei luni.



Informație

Efemia Bladder Support este dezvoltat și fabricat de Invent Medic Sweden. O companie suedeză care creează produse și soluții inovatoare, având ca scop îmbunătățirea sănătății și a calității vieții femeilor.



Distribuitor:

IQ ANDROMED

Distribuitor autorizat ROMÂNIA

Aveți întrebări?

Vizitați www.iqandromed.ro pentru mai multe informații

Dacă aveți alte întrebări sau comentarii vă rugăm să ne contactați la:
contact@iqandromed.com




Str. Eroilor, Nr. 15
Floresti, Jud. Cluj
407280 ROMÂNIA

IQ ANDROMED
ENGINEERING BETTER HEALTH

efemia

bladder support

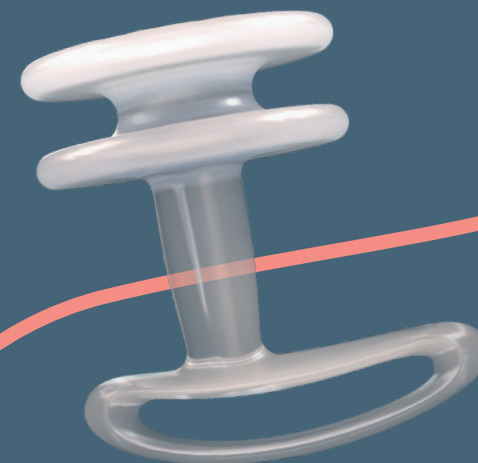


**Reducerea pierderilor
de urină cauzate de efortul fizic**

TVS1000


Sigur & eficient

Incontinența urinară de efort

Incontinența urinară de efort reprezintă pierderea involuntară de urină care apare în urma unui efort fizic, de exemplu în timpul exercițiilor, sau atunci când strănutăm, tușim ori râdem. Este cea mai frecventă formă de incontinență urinară la femei, iar multe femei se confruntă cu această problemă la un moment dat în viață.

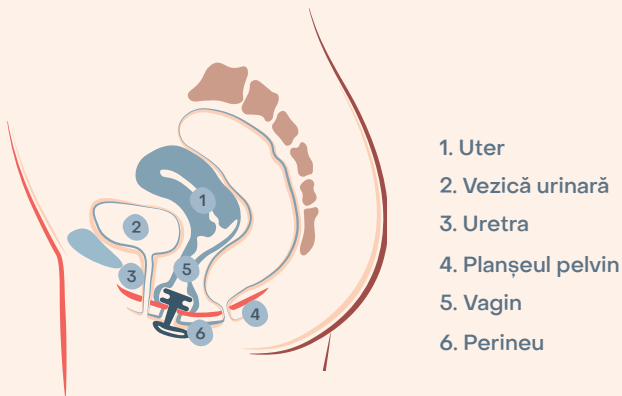

Fiziologia

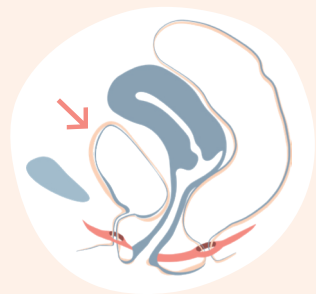


Atunci când presiunea abdominală este exercitată asupra vezicii urinare, uretra se închide cu ajutorul mușchilor planșeului pelvin, care se contractă înainte, către ligamentele sale, prevenind pierderea de urină.

Cu ligamente afectate sau cu mușchii planșeului pelvin slăbiți, aceeași presiune poate forța sistemul să se deschidă, ducând la pierderi de urină. Aceasta este incontinența urinară de efort.



Efemia Bladder Support

Efemia Bladder Support este un dispozitiv vaginal, non-chirurgical. Designul său respectă aceleași principii științifice și metodologii ca și cele mai frecvente soluții chirurgicale utilizate pentru corectarea incontinenței urinare de efort.

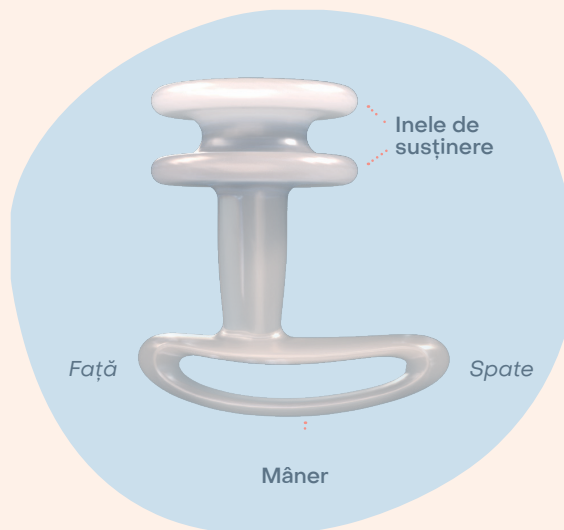

Beneficii

- Reutilizabil timp de 3 luni
- Materiale fine și confortabile
- Mic și convenabil
- Poate fi folosit în timpul exercițiilor cu impact ridicat
- Se poziționează jos în vagin
- Ușor de curățat cu apă și săpun

Detalii

Poate fi utilizat până la 16 ore per 24 de ore


Mărimi: 30 mm, 35 mm & 40 mm (Setul Starter include toate cele 3 mărimi)

Material: Silicon de grad medical




Cum funcționează

Efemia Bladder Support se introduce în vagin astfel încât mânerul să stea strâns lipit de perineu.

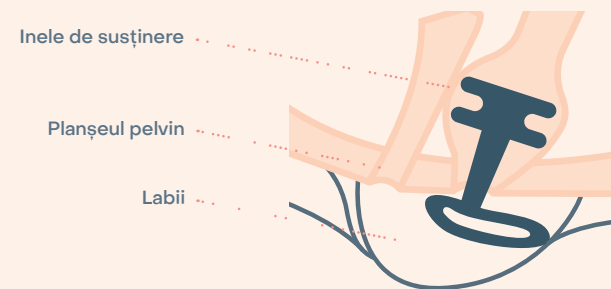

Asigurați-vă că inelele de susținere au trecut complet prin deschiderea vaginală și se află deasupra planșeului pelvin, similar cu introducerea unui tampon.

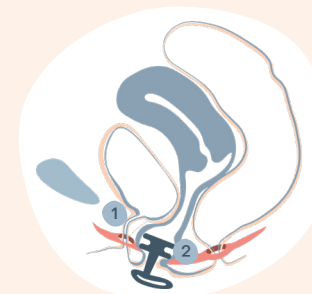

Atunci când presiunea asupra vezicii urinare crește, partea mijlocie a uretrei este împinsă ușor împotriva inelelor de suport, ceea ce o face să se îndoaie, reducând sau prevenind complet pierderea de urină. Nu este nevoie să scoți dispozitivul pentru a urina.

1. Uretra 2. Inele de susținere

Nu utilizați Efemia Bladder Support

Dacă sunteți însărcinată sau dacă aveți sub 18 ani.

Precauții

Utilizați un lubrifiant pe bază de apă pentru a evita disconfortul, dacă zona vulvară sau vaginală este sensibilă.

Reduceți utilizarea dispozitivului dacă apar reacții fizice legate de dispozitiv care nu sunt trecătoare. Solicitați asistență medicală dacă reacțiile persistă în ciuda reducerii utilizării.