



Aplicare

Sistemul de erecție Active3® și Sistemul de erecție Manual sunt dispozitive medicale pentru terapia cu vacuum, utilizate în tratamentul disfuncției erectile (impotenței). În timpul terapiei cu vacuum, erecția este obținută prin presiune negativă. Pompa de vacuum generează presiune negativă în cilindrul din jurul penisului.

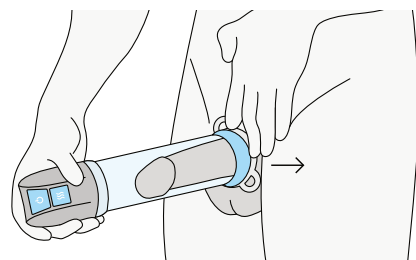

Pentru aceasta, cilindrul este mai întâi introdus peste penis, apoi se pornește procesul de pompare. Vidul creat determină un flux suplimentar de sânge către țesutul erectil, ceea ce duce la rigidizarea penisului. Ulterior, un inel de constricție este glisat pe corpul penisului.

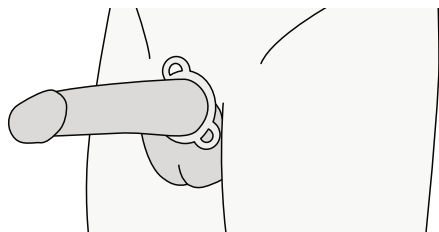

După îndepărtarea cilindrului, inelul de constricție împiedică drenarea sângelui și menține astfel erecția. Cu o erecție menținută în acest mod, este posibil un act sexual normal și satisfăcător. Inelul de constricție nu trebuie purtat mai mult de 30 de minute fără

Cauze frecvente ale Disfuncției Erectile și Impotenței:

- diabet
- hipertensiune arterială / boli cardiovasculare
- intervenții chirurgicale la nivelul prostatei
- boli vasculare (arterioscleroză)
- infarct miocardic și accident vascular cerebral
- nivel crescut al lipidelor din sânge
- depresie sau alte afecțiuni psihice
- boli neurologice (de ex. scleroză multiplă, paraplegie)
- afecțiuni vasculare ale țesutului erectil al penisului
- insuficiență renală sau hepatică
- medicamente (de ex. pentru hipertensiune arterială, aritmii cardiace, medicamente pentru scăderea lipidelor, antiinflamatoare, antidepressive, diuretice)
- fumatul
- consum excesiv de alcool

Soluție:

În cazul uneia sau mai multor dintre aceste afecțiuni, terapia cu vacuum s-a dovedit eficientă, cu efecte secundare minime.

Este o alternativă ușor de utilizat la terapia medicamentoasă.

Informații pentru comandare

Active3®
Sistem de menținere a erecției



EAN 4013273001915
Cod art.: AES 3

Dispozitiv medical

CE 0483

Manual
Sistem de menținere a erecției



EAN 4013273001175
Cod art.: MES 01

Dispozitiv medical

CE



Producător:

KESSEL medintim GmbH

Nordendstr. 82-84

64546 Morfelden-Walldorf

Germany

email: export@medintim.de

www.medintim.de

Distribuitor:

IQ ANDROMED

Distribuitor autorizat ROMÂNIA

Str. Eroilor, Nr. 15


Florești, Jud. Cluj

407280 ROMÂNIA

email: contact@iqandromed.com

www.iqandromed.ro


Terapie cu vacuum pentru Disfuncția Erectilă (Impotență)

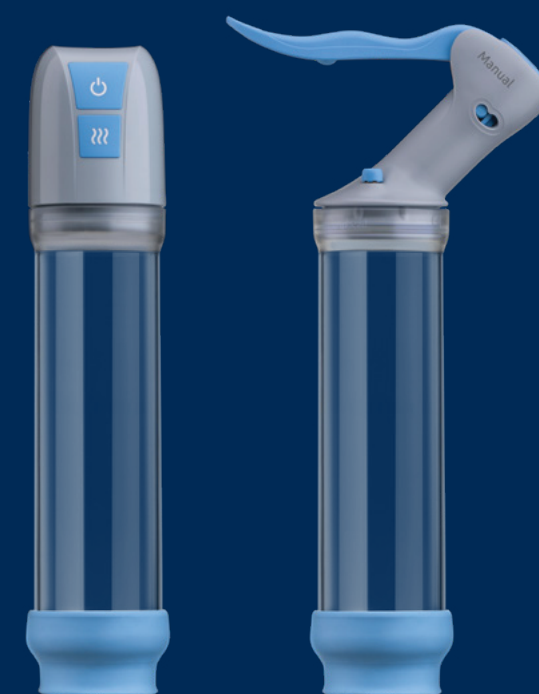

Active3® & Manual

Sistem de menținere a erecției

Medintim

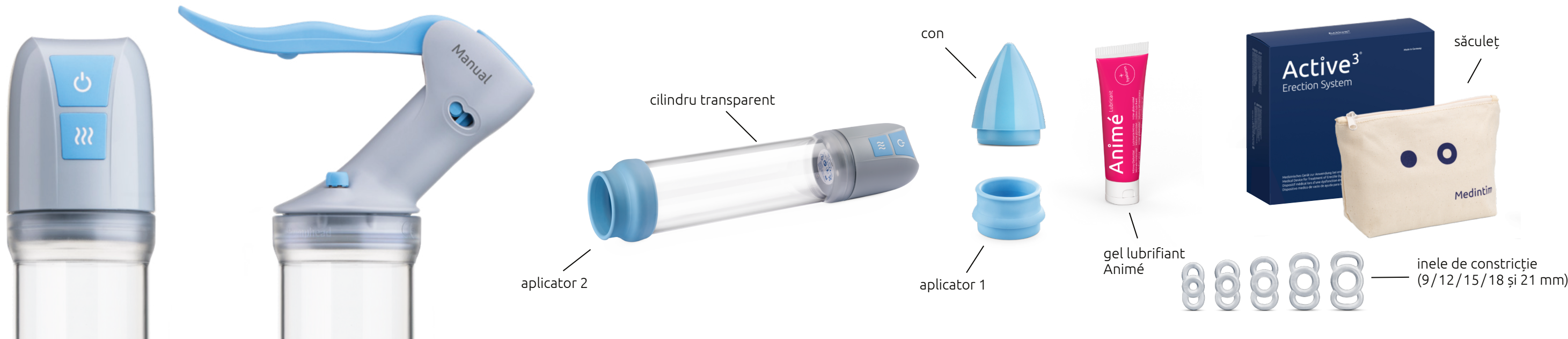

Active³

Sistem de menținere a erecției

Componente:

- cap de pompă electrică și reîncărcabilă
- cilindru transparent (diametru interior 53 mm, lungimea 200 mm)
- aplicator 1 și 2
- con (pentru aplicarea unui inel de constricție)
- 5 inele de constricție de mărimi diferite (diametru interior 9/12/15/18 și 21 mm)
- cablu de încărcare și un adaptor USB
- tub de gel lubrifiant Animé 50 ml
- instrucțiuni de utilizare
- etui pentru păstrare

Garanție de 2 ani pentru capul pompei

Manual

Sistem de menținere a erecției

Componente:

- cap de pompă manuală
- cilindru transparent (diametru interior 53 mm, lungimea 200 mm)
- aplicator 1 și 2
- con (pentru aplicarea unui inel de constricți)
- 5 inele de constricție de mărimi diferite (diametru interior 9/12/15/18 și 21 mm)
- tub de gel lubrifiant Animé 50 ml
- instrucțiuni de utilizare
- etui pentru păstrare

Garanție de 2 ani pentru capul pompei

Diferențele între Active³ și Manual

Ambele aparate sunt comparabile ca performanță și putere. Principala diferență dintre cele două sisteme este că sistemul de erecție Manual funcționează silențios (discret), creând o presiune negativă. Sistemul de erecție Active³, pe de altă parte, este mai confortabil în utilizare.

Ambele dispozitive sunt compatibile între ele, ceea ce înseamnă că capul pompei se potrivește întotdeauna cu cilindrul celuilalt sistem.

Ambele sunt dispozitive medicale certificate, de înaltă calitate, fabricate în Germania. Comandarea pieselor de schimb și obținerea de consiliere personalizată sunt posibile în orice moment după achiziție.

Fabricat în Germania

Avantaje

- restabilirea funcției erectile
- îmbunătățirea semnificativă a succesului recuperării (circulației sanguine), de ex. după intervenții chirurgicale la prostată
- fără efecte secundare cunoscute
- durabil și rentabil; poate fi utilizat ori de câte ori este necesar
- fără interacțiuni medicamentoase
- utilizare simplă și sigură

Sistemele de menținere a erecției Active 3 și Manual sunt dispozitive auxiliare care pot fi prescrise de către medic. Solicitați informații medicului dvs. în acest sens.