

Utilizare și întreținere:

Toate componentele sunt reutilizabile. Inelele sunt supuse uzurii și se pot rupe după utilizări frecvente. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie comandate inele noi.

Curățați cu apă caldă și săpun. Păstrați componentele în săculețul furnizat.

Conținut:

- 2 x inele Helpi® din TPE
- 1 x manșon din policarbonat
- 1 x instrucțiuni de utilizare
- 1 x săculeț din bumbac pentru depozitare

Notă:

Nu lăsați inelul pe penis mai mult de 30 de minute per utilizare.
Recomandăm îndepărtarea părului de pe zona respectivă înainte de utilizare.



Material component Inel Helpi®:

Elastomer termoplastice (TPE) aprobat pentru utilizarea în scopuri medicale

Material component manșon:

Policarbonat

EAN 4013273000574

Fabricat în Germania



Producător:
KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82-84
64546 Morfelden-Walldorf
Germany
email: export@medintim.de

Distribuitor:
IQ ANDROMED
Distribuitor autorizat ROMÂNIA
Str. Eroilor, Nr. 15
Florești, Jud. Cluj
407280 ROMÂNIA
email: contact@iqandromed.com

www.medintim.de

www.iqandromed.ro



în cazul
ejaculării
premature

Inel Helpi®

Pentru bărbații care se
confruntă cu ejacularea
rapidă (ejaculare precoce)

Medintim

Ce este inelul Helpi®?

Inelul Helpi® menține erecțiile ferme și previne ejacularea prematură și vizibilă.*

O soluție simplă, fără medicamente, creme sau geluri.


Inelul Helpi® este o modalitate sigură și ușoară de a reduce stresul.

*Ejacularea precoce (ejaculatio praecox) poate fi un simptom al unei afecțiuni care necesită tratament, precum prostatita sau hipertiroidismul. De aceea, este important să consultați un medic cât mai curând posibil.

Avantaje:


- delicat cu pielea, moale, flexibil
- reutilizabil
- compatibil cu lubrifianți solubili în apă, ulei siliconic, creme pentru piele, grăsimi vegetale
- biocompatibil, testat conform ISO 10993
- compatibil cu prezervative din latex și poliizopren
- fără latex, ftalați, bisfenol A și silicon

Instrucțiuni de utilizare:

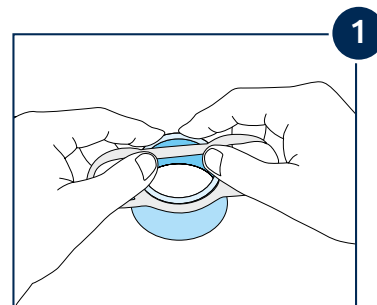


1

Întindeți inelul peste manșonul albastru (Fig. 1).

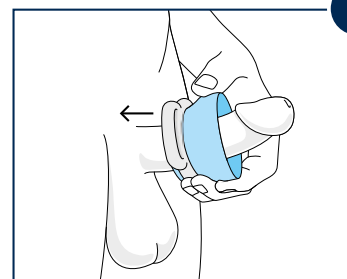


2

Împingeți manșonul, împreună cu inelul, peste penis, înspre corp (Fig. 2).

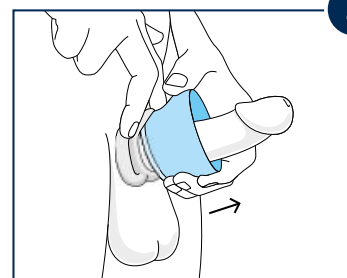


3

Glisați inelul de pe manșon pe penis (Fig. 3).

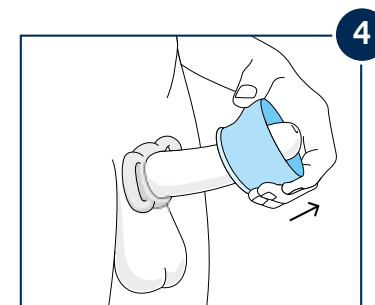

4


Îndepărtați manșonul (Fig. 4).

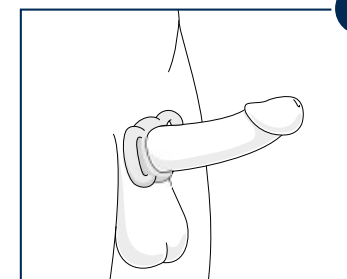

5

Inelul Helpi® va menține erecția indiferent de momentul ejaculării. Erecția se menține chiar și după orgasmul bărbatului, permițând continuarea actului sexual. (Fig. 5)

Inelul Helpi® nu incomodează și poate avea un efect stimulator pentru partener/parteneră.

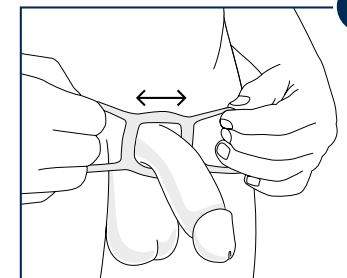

6

Puteți îndepărta oricând inelul Helpi®. Trageți de cele două capete și așteptați câteva secunde, până când erecția începe să se reducă, apoi îndepărtați inelul (Fig. 6).