

Rehabi^{PVT®} Dispozitiv cu vacuum pentru antrenarea funcției erectile

Pentru bărbații activi sexual care suferă de cancer de prostată, capacitatea de a continua să aibă erecții reprezintă o necesitate ce contribuie la o calitate mai bună a vieții și la plăcerea de a trăi.

Publicații din anul 2006 ale lui F. Sommer* arată că mulți pacienți își recapătă erecția completă dacă încep antrenamentul țesutului erectil cât mai curând posibil după intervenția chirurgicală.

Cum apare o erecție?

În stare normală, fibrele musculare sunt tensionate, ceea ce permite pătrunderea unei cantități reduse de sânge în corpii cavernoși. Cavitățile acestora sunt mici, iar scurgerea sângelui este posibilă. În timpul excitației, fibrele musculare ale corpilor cavernoși se relaxează, permițând pătrunderea sângelui. Cavitățile corpilor cavernoși se dilată de 3–4 ori, sângele este reținut în penis și apare rigidizarea.

Lipsa oxigenului

Pentru o funcție erectilă bună, penisul trebuie să fie alimentat suficient cu oxigen, lucru asigurat prin excitația sexuală sau prin erecțiile nocturne involuntare. Totuși, aceste faze de excitație se reduc odată cu înaintarea în vârstă și după intervențiile chirurgicale la nivelul prostatei.

De ce este atât de important antrenamentul țesutului erectil:

Dacă penisul nu este alimentat cu suficient oxigen pe o perioadă îndelungată, acest lucru poate duce la Disfuncție Erectilă (DE). La un penis sănătos, raportul dintre țesutul muscular și țesutul conjunctiv este de aproximativ 50:50. Dacă proporția de țesut muscular scade, sângele care pătrunde nu mai poate fi menținut în penis, iar erecția nu mai este posibilă. De aceea, antrenamentul țesutului erectil cu Rehabi PVT® ar trebui început cât mai devreme posibil. Vasele de sânge sunt mai bine oxigenate, iar mușchii corpilor cavernoși sunt antrenați. O bună alimentare cu oxigen contracarează modificările țesutului, reducerea lungimii și circumferinței penisului. Funcția erectilă este îmbunătățită, iar incontinența este redusă.

*Sommer, Frank: Rehabilitation/ Präservation der erektilen Funktion nach radiakler Prostatektomie. Uro-News 1-2006,S, 48ff.

În cazul afecțiunilor care duc la modificări ale coagulării sângelui sau care provoacă sângerări și erecții prelungite, antrenamentul țesutului erectil trebuie utilizat numai după consultarea unui medic.

Informații pentru comandare

Rehabi^{PVT®}
Dispozitiv cu vacuum pentru
antrenarea funcției erectile



EAN 4013273001540
Cod Art. REHABI PVT



Dispozitiv medical




Producător:
KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82-84
64546 Morfelden-Walldorf
Germany
email: export@medintim.de

Distribuitor:
IQ ANDROMED
Distribuitor autorizat ROMÂNIA
Str. Eroilor, Nr. 15
Florești, Jud. Cluj
407280 ROMÂNIA
email: contact@iqandromed.com

www.medintim.de

www.iqandromed.ro

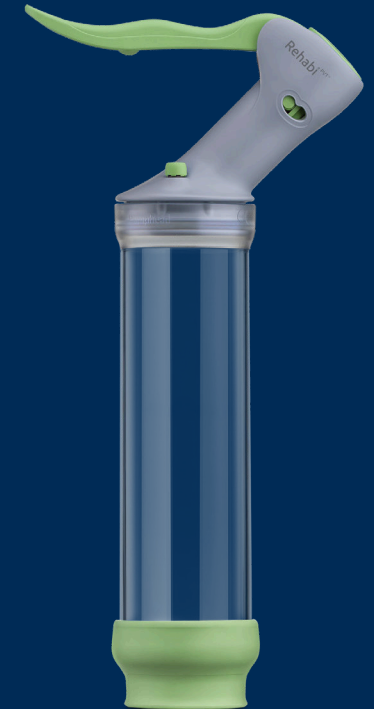


Rehabi^{PVT®}
Dispozitiv cu vacuum pentru
antrenarea funcției erectile

Medintim


Aplicare

Penisul este introdus în capătul deschis al cilindrului. Mișcările de pompare creează o presiune negativă în cilindru, care ar trebui să fie observabilă după aproximativ 20–25 de repetări. Cu ajutorul presiunii negative, sângele pătrunde în corpii cavernoși și în gland. Se produce o erecție indusă artificial, care trebuie menținută timp de câteva minute. În acest interval, penisul rămâne în cilindru.

Antrenamentul corpilor cavernoși poate fi efectuat de mai multe ori pe zi și pe o perioadă de mai multe luni, pentru a îmbunătăți alimentarea cu sânge a corpilor cavernoși.

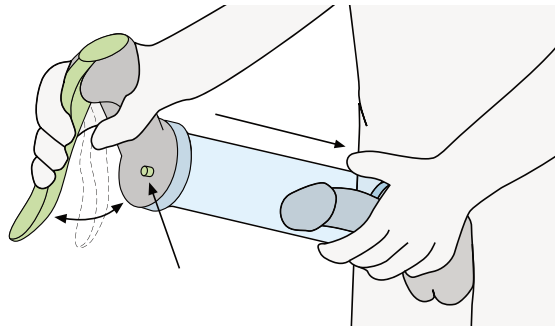

Utilizarea dispozitivului Rehabi PVT® are ca scop stimularea circulației sanguine. Este posibilă extinderea sistemului la o pompă manuală completă cu manșoane de ghidare și inele de constricție (pentru contact sexual). Vă rugăm să solicitați setul de extensie Rehabi PVT®.

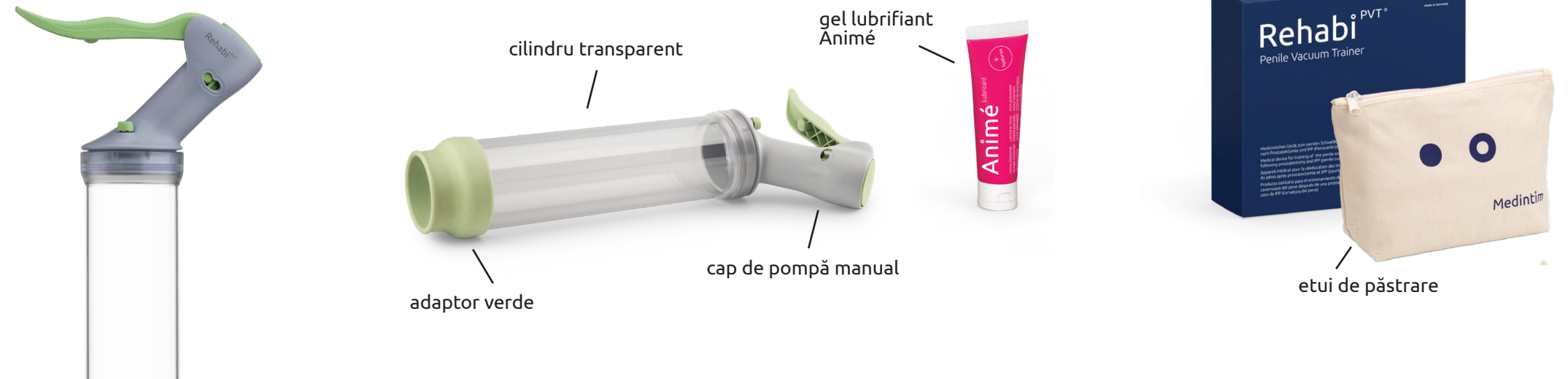

Rehabi^{PVT®} este alcătuit din:

- cap de pompă manual cu vacuum
- cilindru transparent
- adaptor verde pentru corp
- gel lubrifiant (Animé)
- etui pentru păstrare
- instrucțiuni de utilizare

Fără antrenarea țesutului penian

- Transformarea musculaturii netede în țesut conjunctiv inelastic.
- Reducerea procentajului de musculatură netedă.
- Mărirea țesutului conjunctiv și a structurilor de collagen.
- Incapacitatea de a menține în corpii cavernosi sângele alimentat în timpul excitației.
- Reducerea lungimii penisului și favorizarea reducerii circumferinței penisului.

Setul de extensie Rehabi^{PVT®} este alcătuit din:

- con
- aplicator pentru inele 1 + 2
- 5 inele de constricție diferite (diametru interior 9 / 12 / 15 / 18 și 21 mm)
- instrucțiuni de utilizare



Avantajele antrenamentului țesutului penian:

- îmbunătățirea aportului de oxigen la nivelul corpilor cavernoși ai penisului
- reluarea mai rapidă a activității sexuale
- sprijină semnificativ menținerea funcției erectile
- erecțiile spontane apar mai rapid
- reducerea incontinenței
- pierdere mai mică a lungimii și circumferinței penisului
- costuri mai reduse comparativ cu tratamentele medicamentoase
- influență pozitivă asupra evoluției bolii Peyronie