


Seturi Disponibile:

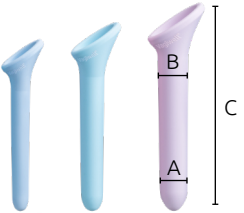

mărimea 1  
(albastru deschis)


mărimea 2  
(verde mentă)

mărimea 3  
(violet)

**Dilatatoare Vagiwell® Small**

- 3 dilatatoare, mărimile 1-3
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art: Vagiwell S  
EAN: 4013273001564

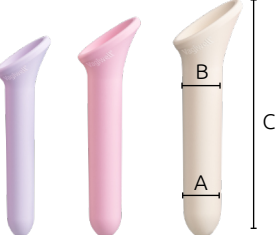

mărimea 3  
(violet)

mărimea 4  
(roz)

mărimea 5  
(bej)

**Dilatatoare Vagiwell® Large**

- 3 dilatatoare, mărimile 3-5
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art: Vagiwell L  
EAN: 4013273001571



mărimea 1  
(albastru deschis)

mărimea 2  
(verde mentă)

mărimea 3  
(violet)

mărimea 4  
(roz)

mărimea 5  
(bej)

**Dilatatoare Vagiwell® Premium**

- 5 dilatatoare, mărimile 1-5
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art.: Vagiwell P  
EAN: 4013273001557

Mărimi:

| Mărime | Culoare          | Diametru A/B | Lungime C |
|--------|------------------|--------------|-----------|
| 1      | albastru deschis | 12/14 mm     | 122 mm    |
| 2      | verde mentă      | 16/18 mm     | 135 mm    |
| 3      | violet           | 20/22 mm     | 150 mm    |
| 4      | roz              | 24/26 mm     | 163 mm    |
| 5      | bej              | 28/30 mm     | 177 mm    |

| Mărimi suplimentare |     |          |        |
|---------------------|-----|----------|--------|
| 0                   | alb | 10/11 mm | 112 mm |
| 5 LS                | alb | 33/36 mm | 181 mm |
| 6                   | alb | 39/41 mm | 188 mm |

Material:


- Dilatatoare Vagiwell®: Silicon
- Săculeț de depozitare: Bumbac



Notă:

Următoarele mărimi sunt disponibile la cerere:

- Vagiwell® 0
- Vagiwell® 5 LS (Lichen Sclerosus)
- Vagiwell® 6

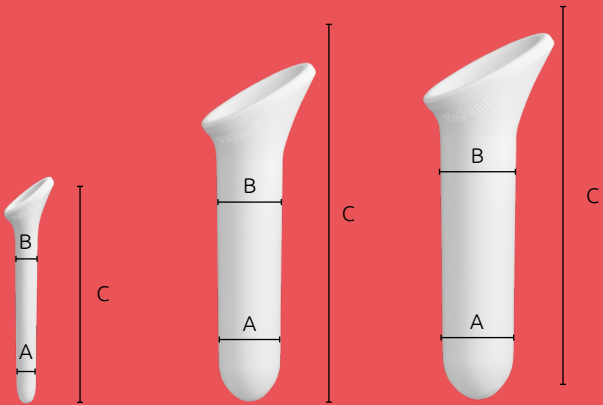

**Dilatator Vagiwell® 0**

- 1 dilatator mărimea 0
- 4 ml lubrifiant

Cod Art.: Vagiwell 0  
EAN: 4013273000970

**Dilatator Vagiwell® 5 LS**

- 1 dilatator mărimea 5 LS
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art.: Vagiwell 5 LS  
EAN: 4013273002165

**Dilatator Vagiwell® 6**

- 1 dilatator mărimea 6
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art.: Vagiwell 6  
EAN: 4013273001632

CE  
Dispozitiv medical

Producător:  
**KESSEL medintim GmbH**  
Nordendstr. 82-84  
64546 Morfelden-Walldorf  
Germany  
email: export@medintim.de

www.medintim.de

Distribuitor:  
**IQ ANDROMED**  
Distribuitor autorizat ROMÂNIA  
Str. Eroilor, Nr. 15  
Florești, Jud. Cluj  
407280 ROMÂNIA  
email: contact@iqandromed.com

www.iqandromed.ro



Dilatatoare  
**Vagiwell®**

Dilatatoare vaginale pentru  
utilizare la domiciliu

Medintim

# Dilatatoare Vagiwell®

suprafață  
netedă



## Există diverse situații în care vaginul poate fi prea strâmt:

- După naștere, din cauza cicatricilor în urma inciziilor chirurgicale la nivelul perineului (epiziotomie) sau a rupturilor perineale
- În timpul sau după tratamente oncologice prin radioterapie sau chimioterapie
- După intervenții chirurgicale vaginale care au implicat îngustarea vaginului și apariția de țesut cicatricial
- Vaginism (contractarea involuntară a mușchilor vaginali)
- Îngustare anatomică a vaginului
- Afecțiuni dermatologice, cum ar fi anumite forme de lichen, de exemplu Lichen Sclerosus
- Motive personale pentru care vaginul se simte prea strâmt

- În urma operațiilor de schimbare de sex (din bărbat în femeie), pentru a menține deschis vaginul reconstruit artificial
- Durere în timpul examinărilor ginecologice
- Durere la introducerea tampoanelor
- Durere în timpul raportului sexual

În toate aceste situații, dilatatoarele Vagiwell® sunt potrivite pentru a ajuta la întinderea progresivă a vaginului. În caz de vaginism, scopul nu este numai întinderea țesutului, cât exersarea introducerii unui obiect în vagin fără durere.

## Instrucțiuni de utilizare:

Scopul acestor exerciții este desensibilizarea vaginului prin lărgirea sa progresivă, făcând astfel ca actul sexual să devină (din nou) lipsit de durere, iar examinările ginecologice să fie o experiență confortabilă. Efectuați exercițiile într-un loc în care vă simțiți confortabilă și relaxată.

- 1 Spălați dilatatoarele Vagiwell® cu apă și săpun delicat înainte de prima utilizare și uscați-le cu grijă.
- 2 Găsiți o poziție relaxată, șezând sau întinsă, care vă permite să depărtați ușor picioarele. Pentru introducerea dilatatoarelor, vă recomandăm să vă întindeți pe spate, cu genunchii îndoiți și picioarele ușor depărtate. Totuși, puteți folosi dilatatoarele și în picioare, sprijinind un picior pe un scaun. Începeți cu cel mai mic dilatator.
- 3 Lubrifiați intrarea în vagin și dilatatorul cu un lubrifiant pe bază de apă.
- 4 Respirați calm. Introduceți ușor dilatatorul în vagin. Trebuie să introduceți dilatatorul doar atât cât vă este confortabil. Dacă simțiți durere, este posibil să aplicați o presiune prea mare.
- 5 Lăsați dilatatorul în vagin sau la intrarea în vagin timp de câteva minute.
- 6 După aceea, introduceți și retrageți dilatatorul, fără a-l scoate complet din vagin. Repetați această mișcare de aproximativ 5 ori. Apoi, începeți să mișcați încet dilatatorul cu o ușoară mișcare de rotație: rotiți dilatatorul de 5 ori spre dreapta și de 5 ori spre stânga.
- 7 Când doriți să încheiați exercițiul, scoateți dilatatorul din vagin. Rămâneți întinsă și relaxați-vă încă câteva minute.

Odată ce reușiți să introduceți o mărime în mod confortabil, înseamnă că vaginul s-a extins suficient pentru a putea trece la următoarea mărime de dilatator.

Exercițiile pot fi repetate de trei până la patru ori pe săptămână. Odată ce puteți introduce confortabil cel mai mare dilatator, puteți lua în considerare reluarea raporturilor sexuale.

## Curățare:

Dilatatoarele Vagiwell sunt destinate utilizării personale (de către o singură pacientă). După fiecare utilizare, spălați-le cu apă și săpun delicat, apoi uscați-le cu grijă.

