

Dilatatoare Vagiwell®

Dilatatoare vaginale
pentru utilizare la
domiciliu

Mărime	Culoare	Diametru A/B		Lungime C	
1	albastru deschis	12/14 mm	0.47/0.55 inch	122 mm	4.80 inch
2	verde mentă	16/18 mm	0.63/0.71 inch	135 mm	5.31 inch
3	violet	20/22 mm	0.79/0.87 inch	150 mm	5.91 inch
4	roz	24/26 mm	0.94/1.02 inch	163 mm	6.42 inch
5	bej	28/30 mm	1.10/1.18 inch	177 mm	6.97 inch
Mărimi suplimentare					
5 LS	alb	33/36 mm	1.30/1.42 inch	181 mm	7.13 inch

Imagini redatate la
dimensiune reală

CE
Dispozitiv medical



Instrucțiuni de utilizare:

- 1 Introduceți dilatatorul Vagiwell® în vagin (începând întotdeauna cu cea mai mică mărime).
- 2 Lăsați dilatatorul în vagin timp de câteva minute, apoi realizați mișcări ușoare de împingere și retragere, fără a scoate complet dispozitivul din vagin.
- 3 Repetați acest exercițiu de 5 ori, după care continuați cu o mișcare de rotație. Rotiți dilatatorul de 5 ori spre dreapta și de 5 ori spre stânga. Aceste mișcări întind delicat țesutul vaginal.
- 4 Odată ce puteți introduce o mărime în mod confortabil, înseamnă că vaginul s-a dilatat suficient pentru a putea trece la următoarea mărime. Când doriți să încheiați exercițiul de dilatare, extrageți dispozitivul, spălați-l și depozitați-l în săculețul de bumbac.

Indicații:

- Dispareunie (durere în timpul raportului sexual)
- Vaginism
- Cicatrici rezultate în urma epiziotomiei (incizie perineală la naștere) sau a rupturilor de perineu
- Postoperator, după intervenții chirurgicale ginecologice
- În timpul și după radioterapie sau chimioterapie
- După intervenții chirurgicale vaginale care au implicat îngustarea vaginului și formarea de țesut cicatricial
- Vaginoplastie / neovagin
- Îngustarea vaginului
- În cazul afecțiunilor dermatologice, cum ar fi anumite forme de lichen (de exemplu, lichen sclerosus), mărimea specială 5 LS este indicată pentru utilizare zilnică.

Exercițiile de dilatare cu ajutorul dispozitivelor Vagiwell® pot fi utile, de asemenea, pentru a reduce disconfortul sau durerea din timpul controalelor ginecologice sau la introducerea tampoanelor.

Seturi disponibile:




mărimea 1 (albastru deschis) mărimea 2 (verde mentă) mărimea 3 (violet)



mărimea 3 (violet) mărimea 4 (roz) mărimea 5 (bej)



mărimea 1 (albastru deschis) mărimea 2 (verde mentă) mărimea 3 (violet) mărimea 4 (roz) mărimea 5 (bej)

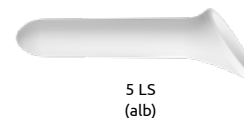

5 LS (alb)

Dilatatoare Vagiwell® Small

- 3 dilatatoare, mărimile 1-3
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art: Vagiwell S

EAN: 4013273001564

Dilatatoare Vagiwell® Large

- 3 dilatatoare, mărimile 3-5
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art: Vagiwell L

EAN: 4013273001571

Dilatatoare Vagiwell® Premium

- 5 dilatatoare, mărimile 1-5
- 50 ml lubrifiant
- săculeț de depozitare

Cod Art.: Vagiwell P

EAN: 4013273001557

Mărime specială:

Vagiwell® 5 LS

Cod Art.: Vagiwell 5 LS

EAN: 4013273002165

Producător:
KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82-84
64546 Morfelden-Walldorf
Germany
email: export@medintim.de

www.medintim.de

Distribuitor:
IQ ANDROMED
Distribuitor autorizat ROMÂNIA
Str. Eroilor, Nr. 15
Florești, Jud. Cluj
407280 ROMÂNIA
email: contact@iqandromed.com

www.iqandromed.ro

CE
Dispozitiv medical

Medintim