
Prefert® Gel Vaginal pentru cuplurile care își doresc un copil

Prefert® Gel Vaginal este un gel lubrifiant care susține activitatea spermatozoizilor. Prefert® Gel Vaginal este disponibil online, fără prescripție medicală.

Mod de utilizare:

1. Înainte de actul sexual, scoateți un aplicator de unică folosință cu Prefert® Gel Vaginal din ambalaj.
2. Îndepărtați capacul.
3. Introduceți aplicatorul vaginal în vagin. Strângeți aplicatorul pentru a introduce gelul. Scoateți aplicatorul.
4. Acum puteți începe actul sexual.

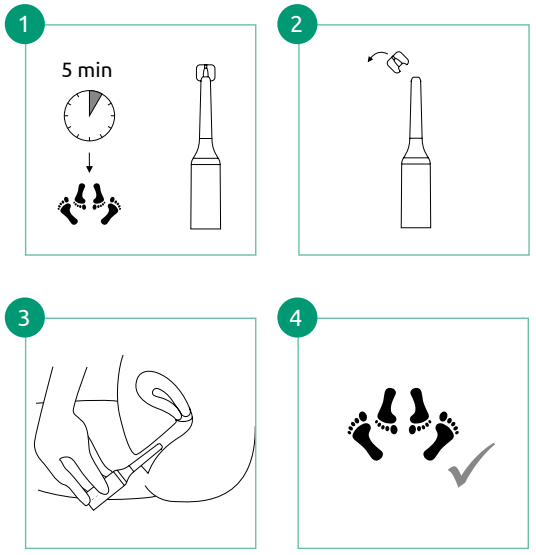

Ingrediente:
Apă purificată, Clorură de sodiu, Fosfat de sodiu, Fosfat de potasiu, Arabinogalactan, Hidroxietilceluloză, Polihexanidă

Nu conține parabeni, siliconi, uleiuri minerale sau produse de origine animală, produs vegan.

Conținut:
- 8 aplicatoare de unică folosință preumplute cu Prefert® Gel Vaginal, a câte 5 ml de gel fiecare.

Conținutul acestui pachet este suficient pentru 4 – 8 cicluri de ovulație.

După utilizare:
Aruncați aplicatoarele goale la gunoiul menajer.


CE
Dispozitiv Medical
Fabricat în Germania

Producător:
KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82-84
64546 Morfelden-Walldorf
Germany
email: export@medintim.de
www.medintim.de

Distribuitor:
IQ ANDROMED
Distribuitor autorizat ROMÂNIA
Str. Eroilor, Nr. 15
Florești, Jud. Cluj
407280 ROMÂNIA
email: contact@iqandromed.com
www.iqandromed.ro

15.07.2026

Vă ajută să rămâneți însărcinată

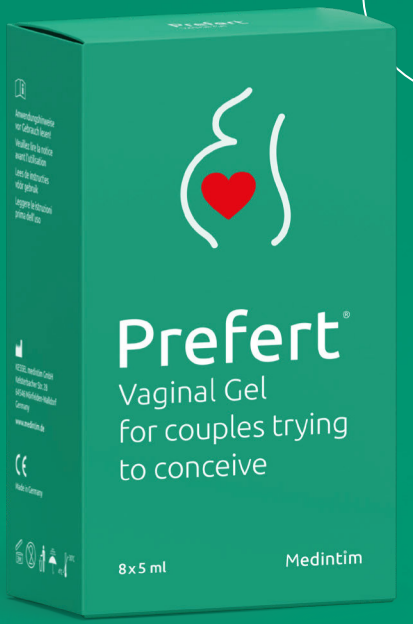

Prefert®

Gel Vaginal pentru cuplurile care își doresc un copil

Medintim

Prefert®
Gel Vaginal


Un lubrifiant care susține fertilitatea naturală și vă ajută să rămâneți însărcinată.

Dorința de a avea un copil rămâne neîmplinită pentru aproximativ 1 din 7 cupluri. O posibilă cauză este un pH vaginal mult prea acid în timpul zilelor fertile ale femeii (la ovulație).

Prefert® Gel Vaginal este unic și favorizează un mediu optim pentru spermatozoizi. Supraviețuirea și mobilitatea spermatozoizilor sunt îmbunătățite, crescând astfel șansele de concepție.

Multe cupluri se supun unei presiuni psihice și au raporturi sexuale doar la momentul „potrivit". Raporturile sexuale programate exact în perioada ovulației pot genera stres, ceea ce poate duce la uscăciune vaginală și la disconfort sau durere în timpul actului sexual.

Prefert® Gel Vaginal face raportul sexual mai ușor și mai plăcut. Lubrifianții convenționali pe bază de apă au un pH scăzut (acid) și afectează negativ spermatozoizii, aceștia reduc șansele de concepție și modifică vâscozitatea secreției vaginale.

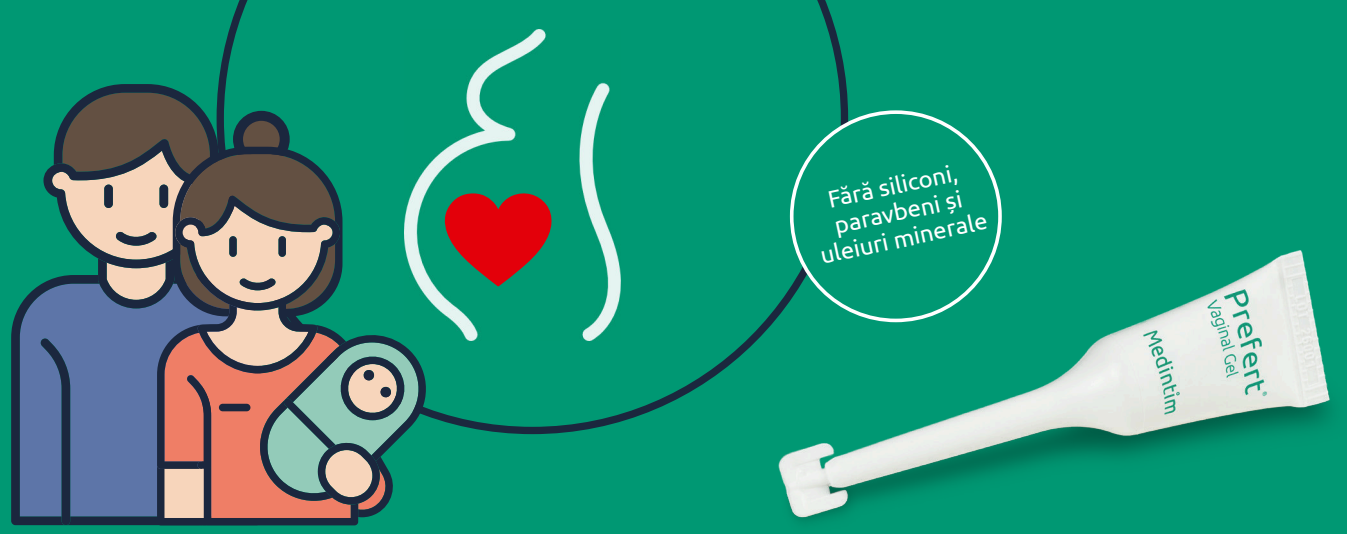

Condiții optimizate pentru concepție

Prefert® Gel Vaginal creează pH-ul vaginal ideal pentru concepție. În acest mod, ajută spermatozoizii să ajungă mai ușor la nivelul colului uterin și la ovul.

Recomandare:

Puteți verifica dacă pH-ul dumneavoastră vaginal este prea acid în perioada ovulației. Achiziționați un test de pH (de la farmacie) și măsurați pH-ul în perioada ovulației. Dacă valoarea este 5,0 sau mai mică, mediul este prea acid pentru ca spermatozoizii să supraviețuiască și să aibă loc fertilizarea. Prefert® Gel Vaginal este lubrifiantul adecvat pentru a corecta această problemă.

Când se utilizează:

Pentru utilizare temporară în cele mai fertile trei zile ale ciclului feminin (perioada ovulației).

A se utiliza o singură dată în interval de 24 de ore.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Cu un pH ajustat între 7,0 și 7,4, Prefert® Gel Vaginal oferă mediul perfect pentru spermatozoizi, similar pH-ului natural al vaginului în timpul zilelor fertile. În celelalte zile ale ciclului menstrual, pH-ul este mai scăzut pentru a proteja împotriva infecțiilor. Proprietățile osmotice ale gelului Prefert® ajută spermatozoizii să migreze mai ușor către colul uterin.

Proprietăți:

- Fără siliconi și fără parabeni
- Fără miros și fără culoare
- Fără gust
- Nu pătează
- Solubil în apă
- Produs vegan

Notă:

Dacă ați suferit recent vreo intervenție chirurgicală în sfera ginecologică, consultați medicul dumneavoastră înainte de utilizare. Nu utilizați Prefert® Gel Vaginal dacă aveți o infecție vaginală activă.